


MATERIAL MIKROFASER

Das Material der Pflegedecke besteht aus einer hautsympathischen, atmungsaktiven und hochwertig gestrickten Mikrofaser aus 100% Polyester; zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Der Stoff ist dauerhaft kuschelweich und flauschig, selbstglättend, leicht und elastisch. Auch nach oftmaligem Waschen bleibt er fusselfrei und formbeständig, robust und dabei langlebig in seiner Farbbrillanz und Lichtechtheit. Er bietet die perfekte Balance zwischen Funktion, Optik und Komfort.


Durch eine gezielte Modifikation des Polyester-Moleküls ist der Stoff permanent feuerhemmend und schwer entflammbar. Diese Eigenschaft geht selbst durch Gebrauch, Wäsche und Alterung nicht verloren. Nach einem Brandfall gibt es kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchgasentwicklung. Der Stoff wurde in einer Vielzahl nationaler und internationaler Brandschutz-Prüfverfahren getestet und zertifiziert.

Aufgrund der besonderen Materialeigenschaften kann die Pflegedecke auch Hausstauballergikern und Rheumatikern empfohlen werden. Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

Grundsätzlich kann die Pflegedecke in den folgenden Farben geliefert werden.

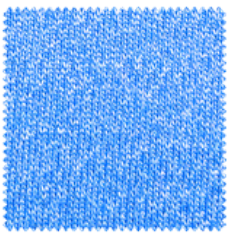

301 stahlblau

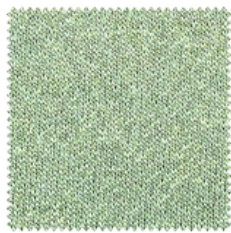

401 graugrün

PRODUKTMERKMALE

Material	100% Polyester TREVIRA® CS-FR	
Farbe	Stahlblau / Graugrün	
Lieferbar	ab Lager Hamburg	
Produziert	in Europa	
Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle	kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.	
Pflege- und Waschhinweise	<p>Separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen und geringer Desinfektionswaschmittelzugabe bei niedriger Temperatur von 60° C in der Waschmaschine. Das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat waschen.</p> <p>Grundsätzlich ist das Material kochfest, d.h. Waschen ist bis 90° C möglich. Der Stoff ist bügelfrei und sollte nicht im Trockner getrocknet werden. Eine Trocknernutzung ist zwar möglich, aber nicht erforderlich. Wenn doch notwendig: Schonendere Behandlungsart mit reduzierter thermischer Belastung (Temperatur 60° C) und kürzerer Behandlungsdauer wählen.</p> <p>HINWEIS: Der Einsatz von Weichspülern zerstört die Materialeigenschaften.</p> <p>Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.</p>	



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de